

Aparat do badania uwalniania Dissilio TX8 eco



Aparat do badania uwalniania

Rozwinęliśmy dla Państwa nasz aparat do badania uwalniania "Dissilio TX8 eco" według następującej zasady:

PROSTO i MĄDRZE - UŁATWIAJ SWOJĄ CODZIENNOŚĆ

To oznacza, że wszystkie działania skierowaliśmy na uproszczenie codziennej pracy z Dissilio poprzez mądre rozwiązania - niezależnie od tego, czy używasz Dissilio w R&D czy KJ.


Solidny, elastyczny, innowacyjny i łatwy w użyciu

PROSTO MĄDRZE oznacza przede wszystkim SOLIDNIE. Standardy jakości według ISO 9001: 2015, połączone z "Jakością poprzez projekt", gwarantują najwyższe standardy dokładności, wydajności i niezawodności, minimalizując bieżące koszty laboratorium. Naturalnie, przestrzegane są obecne wytyczne europejskich, amerykańskich i innych Farmakopei. Dzięki najnowocześniejszej elektronice, Dissilio jest liderem w aparatach do badania uwalniania i nadal niezawodnie sprostą rosnącym wymaganiom stawianym nowoczesnym urządzeniom laboratoryjnym w przyszłości. PROSTO MĄDRZE oznacza także ELASTYCZNIE. Dissilio TX8 ECO dostosowuje się elastycznie do twoich potrzeb. Na przykład, dostępne jest od 6 do 8 pozycji, a w wersji TX16 od 12 do 16 pozycji. Może zostać wyposażony we wszystkie rodzaje akcesoriów do uwalniania, takie jak Intrinsic, USP6, Immersion Cell i wiele innych (akcesoria Dissilio). Co najważniejsze, dostępne jest również z naczyniami różnych producentów i rozmiarów. Możliwość użycia naczyń od różnych producentów eliminuje ostatnią dużą zmienną w testach uwalniania i sprawia, że cross-walidacja jest tylko formalnością przy przełączaniu na Dissilio. Różne pakiety pozwalają zamówić Dissilio z funkcjami, które naprawdę potrzebujesz. Na przykład, dodatkowe funkcje, takie jak zgodność z CFR z elektronicznym podpisem, kopia zapasowa na serwerach FTP lub opcje oszczędzania energii. W przypadku, gdy Twoje wymagania zmieniają się w przyszłości, funkcje można łatwo aktywować później, a komponenty mechaniczne można doinstalować. W przyszłości pojawią się dalsze opcje dostosowania, które można doinstalować lub zarezerwować w dowolnym momencie. Masz wybór i możliwość konfiguracji Dissilio indywidualnie i elastycznie zgodnie z twoimi potrzebami.

PROSTO MĄDRZE oznacza ponadto INNOWACYJNIE. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom oferujemy Ci nowy komfort. Nasz standardowy "interfejs przeglądarki" pozwala na dostęp do Dissilio poprzez interfejs przeglądarki internetowej, bez dodatkowej instalacji oprogramowania. Umożliwia to monitorowanie bieżącego statusu działających metod lub zarządzanie metodami wygodnie z miejsca pracy / komputera. Integracja z siecią jest prosta i umożliwia również drukowanie raportów na dowolnej sieciowej drukarce bez dodatkowej instalacji sterownika. Nie marnuj swojego czasu na walidację oprogramowania, wystarczy korzystać z interfejsu przeglądarki. Opcjonalna "funkcja Stagger" ułatwia wkładanie tabletek i pobieranie próbek w różnych momentach czasowych. Opcjonalna "funkcja parent-child" umożliwia łatwe przenoszenie metod, użytkowników i innych ustawień z jednego Dissilio (parent) do innych Dissilios (child). Menu kwalifikacji prowadzi Cię przez poszczególne kroki i sprawia, że kwalifikacja jest dziecinnie prosta. Późniejsza aktywacja funkcji jest szybka i sprawia, że Twój Dissilio jest przygotowany na przyszłość. Modułarna struktura umożliwi w przyszłości dalsze interesujące warianty.

PROSTO MĄDRZE, na koniec, oznacza ŁATWO. Odwołujemy się tu do łatwej obsługi i działania. Zaczyna się od bezpiecznego instalowania naczyń z automatycznym centrowaniem i ochroną krawędzi, automatycznym regulowaniem wysokości pomiędzy USP1 i USP2, łatwym dostępem do naczyń do pobierania próbek, łatwym czyszczeniem łaźni wodnej i ostatecznie prostą i intuicyjną obsługą za pomocą 7-calowego ekranu dotykowego lub interfejsu przeglądarki na komputerze. Oczywiście, Dissilio można łatwo zintegrować z siecią firmy, a dowolna drukarka USB lub sieciowa może być łatwo podłączona. Wiele innych drobnych szczegółów, takich jak zintegrowana szuflada na łopatki, koszyki i inne akcesoria, dopełniają łatwości obsługi.



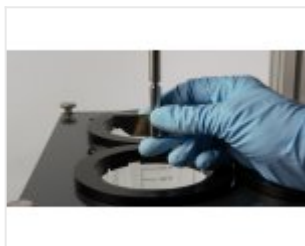

Filmy
